

# Shower Chair



## Assembly, Installation and Operating Instructions

Model No. 9872

Yes, you can.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

#### ⚠ WARNING

- **DO NOT** install or use this equipment without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel, before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- All four leg tips **MUST** be in contact with shower/tub floor at all times.
- **ALWAYS** inspect the shower chair to ensure that it is properly positioned and stable before using. **DO NOT** use the shower chair if it is wobbly or unstable.
- This product should only be used with tub floors wider than 16-inches.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the shower chair.
- The shower chair is **NOT** to be used as a transfer bench, transfer device or climbing device.
- The shower chair has a weight limitation of 250 lb (114 kg).
- Exercise caution when adjusting the height of the shower chair to avoid pinching.

#### ⚠ ACCESSORIES WARNING

- Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

#### ⚠ INSTALLATION WARNING

- After **ANY** adjustments, repair or service and **BEFORE** use, make sure that all parts are properly installed and secure.

### Adjusting Shower Chair Height

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.

#### ⚠ WARNING

Ensure that the shower chair is level and stable before use.

1. Depress the snap button and slide the leg extension to one of nine adjustment holes for the desired height.
2. Allow the snap button to click into the height adjustment hole in the leg extension.

NOTE: An audible "click" will be heard.

NOTE: Make sure the snap button fully protrudes through the height adjustment hole.

3. Repeat this procedure for the three remaining legs.

NOTE: Make sure that all four legs are adjusted to the same height.

### Cleaning

NOTE: Before using any cleaning products, test an area on the underside of the seat to make sure the product does not cause discoloration or staining.

Use water and a mild, non-abrasive cleaner to clean the shower chair.

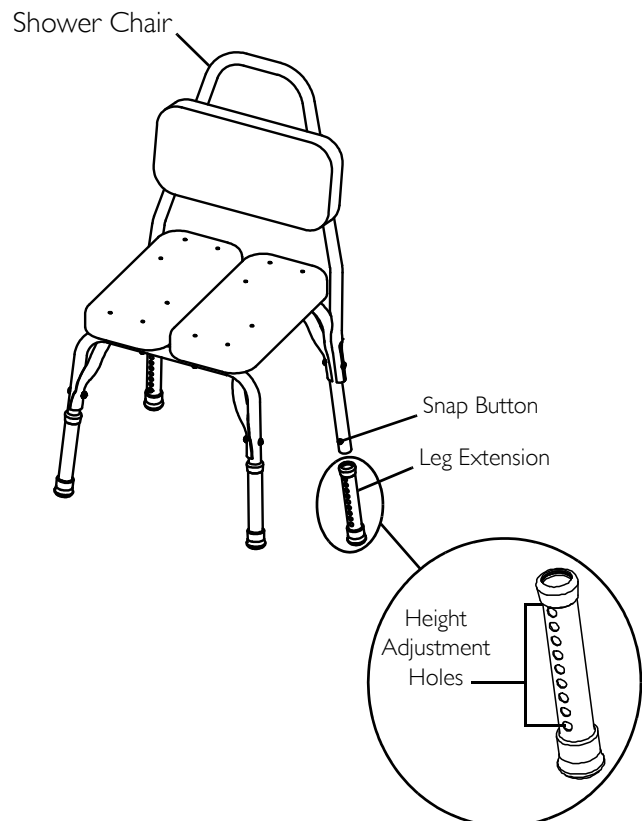


FIGURE 1 Adjusting Shower Chair Height

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

---

## Limited Warranty

Invacare warrants this product to be free from defects in materials and workmanship.

**PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.**

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for three years for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page.

Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will use a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. **C.O.D.** shipments will be refused; please prepay shipping charges.

**LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS: PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.**

**THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.**

**THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.**

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

REMARQUE: Vérifiez TOUTES les pièces pour vous assurer qu'elles n'ont pas été endommagées en cours d'expédition. Si l'on remarque des dommages, ne pas utiliser. Contactez le transporteur/concessionnaire pour de plus amples instructions.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- **NE PAS** installer ou utiliser ce produit sans avoir d'abord entièrement lu et compris ces instructions. Si vous n'êtes pas en mesure de comprendre les avertissements, mises en garde ou instructions, contactez un professionnel de santé, un concessionnaire ou un technicien avant de tenter d'installer cet équipement - autrement des blessures ou des dommages peuvent survenir.
- Les quatre extrémités des pieds **DOIVENT** être en contact avec le sol de la douche/baignoire à tout moment.
- Examinez **TOUJOURS** la chaise de douche pour vous assurer qu'elle est correctement en place et stable avant l'utilisation. **NE PAS** utiliser la chaise si elle est bancal ou instable.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des sols dont la largeur dépasse 40,6 cm (16 po).
- Les utilisateurs aux capacités physiques limitées doivent être surveillés ou assistés lors de leur emploi de la chaise de douche.
- La chaise de douche ne doit **PAS** être utilisée en remplacement d'un banc de transfert ou autre dispositif semblable, ou pour grimper.
- La chaise de douche comporte une limite de poids de 114 kg (250 lb).
- Faites attention en ajustant la hauteur de la chaise de douche afin de ne pas vous pincer.

#### ⚠ AVERTISSEMENT À PROPOS DES ACCESSOIRES

- Les produits Invacare sont spécialement conçus et fabriqués pour être employés conjointement avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et il n'est pas recommandé qu'ils soient employés les produits Invacare.

#### ⚠ AVERTISSEMENT D'INSTALLATION

- Après TOUT ajustement, réparation ou entretien, et AVANT l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement et soigneusement installées.

### Règlage de la hauteur de la chaise de douche

REMARQUE: Pour cette procédure, consultez la FIGURE 1.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la chaise de douche est bien stable et à plat avant l'utilisation.

1. Appuyez sur le bouton-pression et faites glisser l'extension du pied jusqu'à l'un des neuf orifices de réglage en fonction de la hauteur correcte.
2. Encastrez le bouton-pression dans les orifices de réglage de la hauteur approprié de l'extension du pied.

REMARQUE: On entendra un « clic ».

REMARQUE: Assurez-vous que le bouton-pression dépasse complètement des orifices de réglage de la hauteur.

3. Répétez cette procédure pour les trois autres pieds.

REMARQUE: Assurez-vous que les quatre pieds sont tous ajustés à la même hauteur.

### Nettoyage

REMARQUE: Avant d'utiliser tout produit de nettoyage, testez une zone sous le siège pour vous assurer que le produit ne cause pas de décoloration ou de taches.

Employez de l'eau et un détergent doux et non abrasif pour nettoyer la chaise de douche.

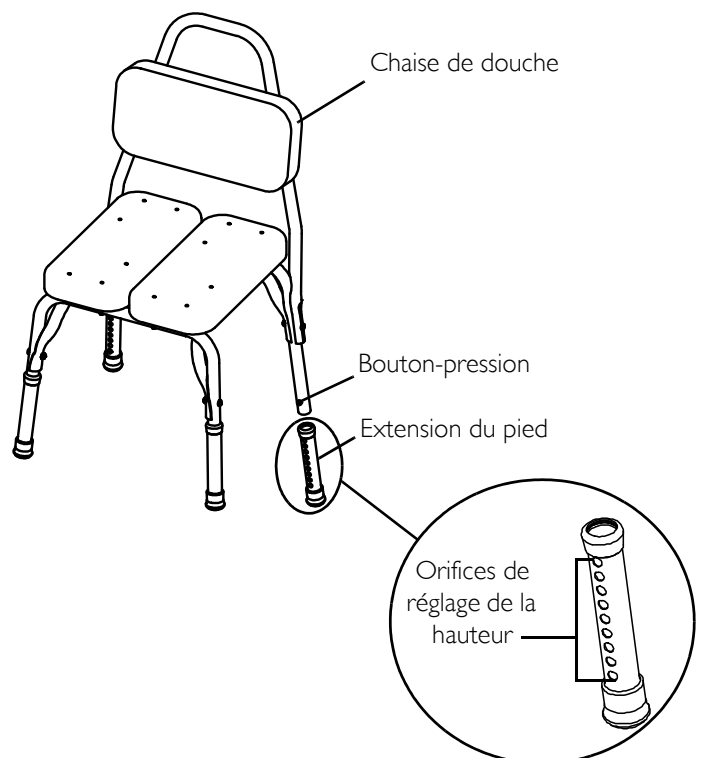


FIGURE 1 Règlage de la hauteur de la chaise de douche

# Garantie Limitée

Invacare garantit que ce produit est exempt de vices de matière et de fabrication.

**REMARQUE : LA GARANTIE PRÉSENTÉE CI-DESSOUS A ÉTÉ MISE AU POINT EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.**

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur/utilisateur initial de notre produit.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir de droits juridiques qui varient d'état à état.

Invacare garantit à l'acheteur/utilisateur original que ce produit est exempt de vices de matière et de fabrication pendant trois ans d'utilisation par l'acheteur original. Si durant cette période couverte par la garantie un produit s'avère avoir des défauts, il sera réparé ou remplacé à la discrétion d'Invacare. Cette garantie ne comprend pas la main-d'œuvre ni les frais d'expédition qui seraient occasionnés à l'installation de pièces de rechange ou de réparation de cette pièce sur un tel produit. L'obligation unique d'Invacare et votre recours exclusif sous cette garantie se limitent à une telle réparation ou à un tel remplacement.

Pour tout service couvert par la garantie, veuillez contacter le distributeur auprès duquel vous avez acheté votre produit Invacare. Dans le cas où vous n'obtiendriez pas satisfaction avec votre service de garantie, veuillez écrire directement à Invacare à l'adresse au dos de cette brochure. Fournissez-nous le nom et l'adresse de votre distributeur, le numéro du modèle, la date d'achat et indiquez la nature du défaut et, si le produit possède un numéro de série, indiquez-le également.

Invacare Corporation émettra une autorisation de retour. L'appareil ou les pièces défectueuses doivent être renvoyés pour inspection de garantie en utilisant le numéro de série, le cas échéant, comme identification, dans les trente jours suivant la date d'autorisation.

Ne PAS renvoyer les produits à l'usine sans avoir obtenu préalablement notre accord .

Les expéditions en port dû seront refusées ; veuillez payer le fret d'avance.

**LIMITATIONS ET EXCLUSIONS : LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. EN OUTRE, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS PORTANT DES NUMÉROS DE SÉRIE SI CES NUMÉROS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS OU EFFACÉS ; ELLE NE S'APPLIQUE PAS NON PLUS AUX PRODUITS QUI ONT ÉTÉ SUJETS À NÉGLIGENCE, ACCIDENTS, QUI ONT ÉTÉ UTILISÉS, ENTRETENUS OU STOCKÉS DE MANIÈRE INCORRECTE, AUX PRODUITS QUI ONT ÉTÉ MODIFIÉS SANS L'AUTORISATION EXPRESSE ÉCRITE D'INVACARE, NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER : MODIFICATION DU PRODUIT PAR L'EMPLOI DE PIÈCES OU D'AJOUTS NON AUTORISÉS ; DOMMAGES OCCASIONNÉS AU COURS DE RÉPARATIONS EFFECTUÉES SUR L'UNE DES PIÈCES SANS L'ACCORD SPÉCIFIQUE PRÉALABLE D'INVACARE ; DOMMAGES CAUSÉS PAR DES CIRCONSTANCES ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE D'INVACARE ; PRODUITS RÉPARÉS PAR TOUTE PERSONNE AUTRE QU'UN CONCESSIONNAIRE D'INVACARE ; LA DÉTERMINATION RELATIVE AUX CONDITIONS CI-DESSUS SERA À LA DISCRÉTION EXCLUSIVE D'INVACARE.**

**LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU POUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN BUT PARTICULIER ET LE SEUL RECOURS POUR TOUTE INFRACTION À LA GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, SE LIMITERA À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS CONTENUES AUX PRÉSENTES.**

**L'APPLICATION D'UNE GARANTIE IMPLICITE QUELCONQUE NE POURRA PAS S'ÉTENDRE AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE CI-DESSUS. INVACARE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES.**

**CETTE GARANTIE SERA ÉTENDUE POUR ÊTRE CONFORME AUX LOIS ET RÉGLEMENTATIONS DE L'ÉTAT/PROVINCE.**

Invacare Corporation

[www.invacare.com](http://www.invacare.com)



**USA**  
One Invacare Way  
Elyria, Ohio USA  
44036-2125  
800-333-6900

**Canada**  
570 Matheson Blvd E Unit 8  
Mississauga Ontario  
L4Z 4G4 Canada  
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

© 2009 Invacare Corporation

Part No 1075941

Rev E - 01/09

**Yes, you can.®**

