

Cleaning Instructions for Expression Collection Combo Kit and Manual Diaphragm Kit

PRIOR TO FIRST USE:

DO NOT boil tubing or tubing adapter



- Disassemble and boil all the parts, in the Kits, in water for 5 minutes.



- Be sure to use enough water to keep all parts afloat while boiling.
- Remove all parts from the water immediately after sterilizing.
- To avoid scalds and burns, **DO NOT** touch the sterilized parts with bare hands.



- Ensure all parts are completely dry before use. Partially dry components may affect the performance of your electric breast pump.

GENERAL CLEANING:

Set Aside Tubing, Tubing Connector and diaphragm Cap.



- These items do not need to be washed
- If any liquid or liquid vapor is found inside the tubing, follow the Tubing Cleaning Instructions carefully before use.
- All parts of the Kits, or Sweet Assist Handle may be cleaned in the upper rack of your dishwasher or hand-washed with dish soap in hot water.
- **DO NOT** use solvents or abrasives. Rinse with hot, clean water.
- To clean the main electric pump unit, wipe it with a wet wipe or damp cloth, using only water or mixed with milk soap.

TUBE CLEANING INSTRUCTIONS:

DO NOT Insert any objects into the tubing



- If liquids or liquid vapors are found inside the tubing, rinse the tubing with clean hot water.
- Hang to air-dry completely before using.

BEFORE EACH USE:



- Wash your hands thoroughly with soap and warm water before handling Kit parts, the electric breast pump, the manual pump kit, or any attachments.
- Make sure all parts are clean and dry.
- Ensure that the tubing is free from any liquid or liquid vapor.
- **DO NOT** operate your Rumble Tuff breast pump if any liquid or liquid vapor is visible in the tubing.



Rumble Tuff

865 N 1430 W Orem, UT 84057
801-609-8168 or 1-855-228-8388
customerservice@rumbletuff.com

DELICATE VALVES:



CAUTION: Be gentle when cleaning the Membrane Valve (One-Way Valve). If it gets damaged, your breast pump will not function properly. To clean the Membrane Valve (One-Way Valve), rub it lightly between your fingers in warm soapy water, then rinse thoroughly in clean water, allow to air dry. **DO NOT** insert objects into the Membrane Valve (One-Way Valve), this may cause damage to the valve.

Instrucciones de Limpieza para el Kit Combo de Colección de Expresiones y el kit de Diafragma Manual

ANTES DEL PRIMER USO:

NO hierva la tubería o el adaptador de tubería



- Desmontar y hierva todas las partes, de los kits, en agua durante 5 minutos.



- Asegúrese de usar suficiente agua para mantener todas las partes a flote mientras hierven.




- Retire todas las partes del agua inmediatamente después de la esterilización.

- Para evitar escaldaduras y quemaduras, NO toque las partes esterilizadas con las manos descubiertas.

- Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de usar. Los componentes parcialmente secos pueden afectar el rendimiento de su extractor eléctrico.

LIMPIEZA GENERAL:

Ponga a un lado el tubo, el conector del tubo y la tapa del diafragma.

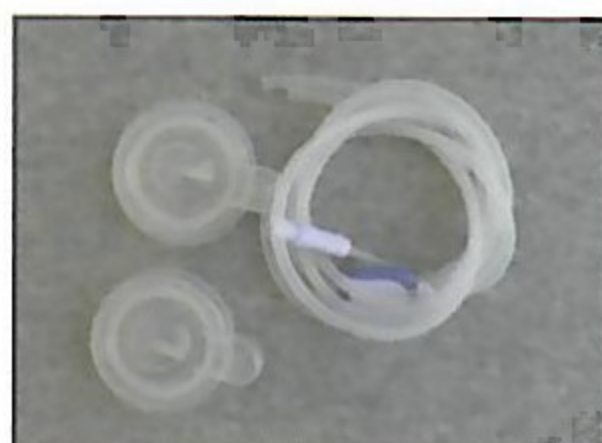

- No es necesario lavar estos artículos
- Si encuentra líquido o vapor líquido dentro del tubo, siga las instrucciones de limpieza de tubo cuidadosamente antes de usarlo.



- Todas las partes de los kits, o la Manija Sweet Assist pueden limpiarse en la rejilla superior de su lavaplatos o lavarse a mano con jabón en agua caliente.



- NO use solventes ni abrasivos. Enjuague con agua caliente y limpia.
- Para limpiar la unidad principal del extractor eléctrico, límpiela con una toallita mojada o un paño húmedo, usando solo agua o mezclada con jabón de leche.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE TUBOS:

NO inserte ningún objeto en el tubo



- Si se encuentran líquidos o vapores líquidos dentro del tubo, enjuague la tubería con agua caliente limpia.
- Cuelgue para secar al aire por completo antes de usar.

ANTES DE CADA USO:



- Lávese bien las manos con agua tibia y jabón antes de tocar las piezas del kit, el extractor eléctrico, el kit de extractor manual o cualquier accesorio.

- Asegúrese de que

todas las piezas estén limpias y secas.

- Asegúrese de que el tubo esté libre de cualquier líquido o vapor líquido.
- NO opere su extractor Rumble Tuff si cualquier vapor líquido o líquido es visible en el tubo.



Rumble Tuff®

865 N 1430 W Orem, UT 84057
801-609-8168 or 1-855-228-8388
customerservice@rumbletuff.com

VÁLVULAS DELICADAS:



PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al limpiar la válvula de membrana (Válvula de Una vía).

Si se daña, su extractor de leche no funcionará correctamente.

Para limpiar la válvula de membrana (Válvula de Una vía), frótelas suavemente entre los dedos con agua caliente y jabón,, luego enjuague bien con agua limpia y deje secar al aire.

NO inserte objetos en la válvula de membrana (Válvula de Una vía), esto puede dañar la válvula.